



Medical Technologies

EasyOne Air

Mobil- und PC-Spirometrie

Optimierte Spirometrie. Bessere Ergebnisse.

Das **EasyOne Air** von n d d ist ein innovatives Spirometer. Mit bedienungsfreundlichem Touchscreen und integrierten Testanweisungen fügt sich das mobile Gerät nahtlos in Ihre Praxisabläufe ein.

Dank der patentierten TrueFlow-Technologie ist keine Kalibrierung durch den Anwender nötig und Messergebnisse stehen sofort für die Diagnose bereit. Für zuverlässige Spirometrietests ist die erste Wahl ein **EasyOne Air**.



EasyOne




Einfach. Zuverlässig. Bewährt.



Animationen

Verfügbar mit Software **EasyOne Connect**

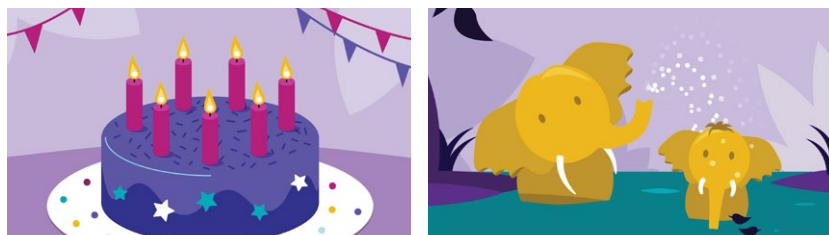

Technische Daten

Testtypen: FVC, FVL, SVC, MVV und Pre-/Post-Test

Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch

EMR-Konnektivität: EasyOne Connect

Abmessungen: 87 mm x 155 mm x 36 mm, 0,356 kg

Normen: ATS/ERS 2019 und 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

Artikelnummern

2500-2INT: EasyOne Air Spirometrie-System (international)

5050-50: EasyOne FlowTube, Pkg. mit 50 Stück

5050-200: EasyOne FlowTube, Pkg. mit 200 Stück

5050-500: EasyOne FlowTube, Pkg. mit 500 Stück

Merkmale

- Grosser Farb-Touchscreen
- Einfache Navigation
- Dauerhaft stabile Kalibration
- Wiederaufladbarer Akku: >100 Tests mit einer Akkuladung
- Bluetooth-Anbindung
- Flexible Anwendung
- Mobil- und PC-Modus
- Echtzeit-Animationen
- Echtzeit-Datenübertragung
- Bewährte Integration in gängige EMR/EHR-Systeme

TrueFlow
makes the difference

Die einzigartige Ultraschalltechnologie von ndd garantiert in allen Flow-Bereichen genaue Ergebnisse, unabhängig von Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit. ndd **TrueFlow** ist eine hygienische und widerstandsfreie Technologie. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

EasyOne Connect

Die Software **EasyOne Connect** bietet eine zentrale Datenbank und Plattform für alle **EasyOne**-Geräte. Das Datenmanagement war noch nie so einfach.



n d d Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 512 65 00

n d d Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA
Phone: +1-978-470-0923



CODE SCANNEN

