



Medical Technologies


# EasyOne Pro/LAB

Umfassende patientennahe Lungenfunktionstests

## Erweiterte Lungendiagnostik – Die Lunge verdient mehr Beachtung

Das EasyOne Pro/LAB ist die innovative Lösung in der Lungenfunktionsdiagnostik: Es bietet eine Vielzahl von Lungentests an und ist dennoch kompakt und bedienungsfreundlich. Mit Spirometrie-, Lungenvolumen- und DLCO-Tests deckt es wichtige Bedürfnisse in der Lungenmedizin ab.

Mit dem EasyOne Pro/LAB haben Sie ein effizientes Gerät für die Diagnose, Behandlung und Überwachung von Lungenerkrankungen an Ihrer Seite. Es ist mobil, bedienungsfreundlich, genau und für diverse Settings geeignet. Mit dem EasyOne Pro/LAB gewinnen Sie Zeit für die wichtigen Aufgaben in Ihrem medizinischen Alltag.

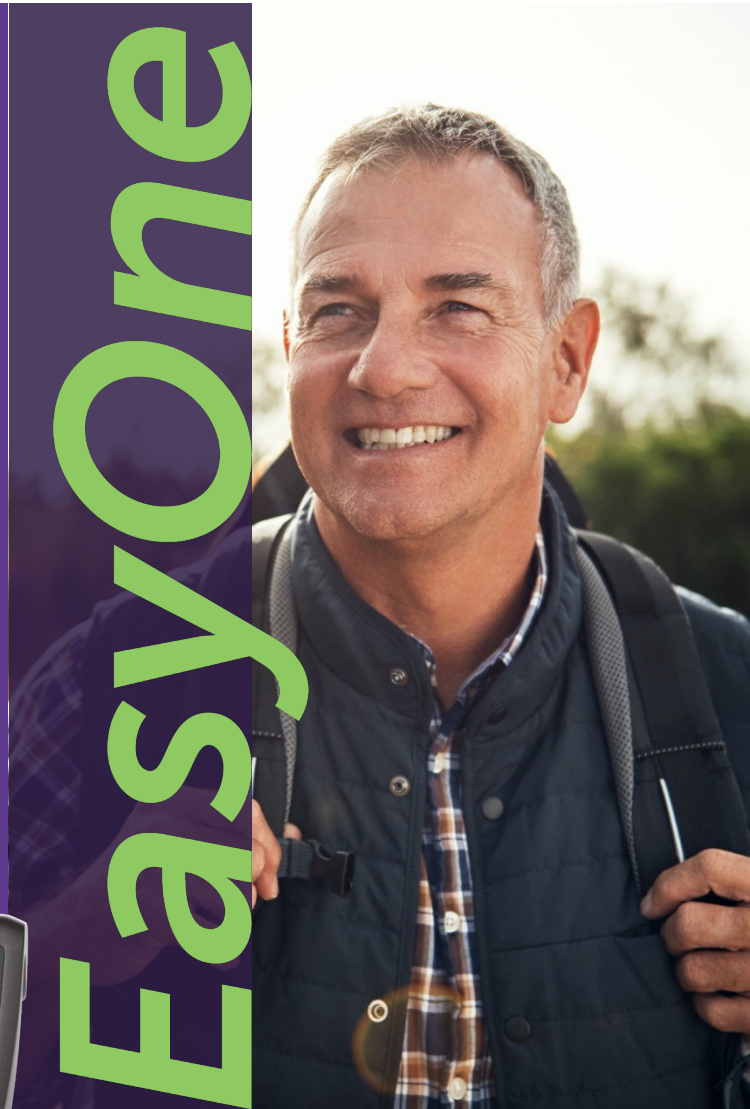

# Präzise Messungen



## EasyOne Pro

- Spirometrie
- DLCO
- Provokationstest

### Lungenvolumen

- Single-Breath Helium-Verdünnung

## EasyOne Pro LAB

- Spirometrie
- DLCO
- Provokationstest

### Lungenvolumen

- Multiple-Breath Stickstoff-Washout



## Spezifikationen

**EasyOne Pro:** FVC, FVL, SVC, MVV, Provokationstest und Prä-/Post-Test, DLCO

**EasyOne Pro LAB:** FVC, FVL, SVC, MVV, Provokationstest und Prä-/Post-Test, DLCO, MBW, LCI

**Sprachen:** Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch

**EMR-Verbindung:** HL7, XML, GDT, API mit EasyOne Connect

**Spirometrie-Standards:** erfüllt ATS/ERS-Standards 2005 & 2019 und NIOSH/OSHA

**DLCO-Standards:** erfüllt ATS/ERS-Standards für DLCO 2005 & 2017

**Masse:** 27 x 33.5 x 27 cm (H x W x D), 8 kg

## Artikelnummern

**3000-1:** EasyOne Pro

**3100-1:** EasyOne Pro LAB

**2050-1:** Spirette Schachtel mit 50 Stk.

**2050-5:** Spirette Schachtel mit of 200 Stk.

**2050-10:** Spirette Schachtel mit 500 Stk.  
Nicht in allen Ländern erhältlich

**3050-1:** DLCO Barrietten Schachtel mit 50 Stk.

**3050-2:** DLCO Barrietten Schachtel mit 100 Stk.

**3150-1:** FRC Barrietten Schachtel mit 40 Stk.  
(nur zur Verwendung mit EasyOne Pro LAB)

**3150-2:** FRC Barrietten Schachtel mit 80 Stk.  
(nur zur Verwendung mit EasyOne Pro LAB)



ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA  
Phone: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Switzerland  
Phone: +41 44 512 65 00



## Merkmale

- Portables und leichtes Design: ideal für den patientennahen Einsatz
- Einfache Bedienung, keine Aufwärmzeit
- Hygienische Lösung: Spezielle Atemrohre (Spirette und Barriette) vermeiden Kreuzkontaminationen.
- Schweizer Präzision
- Minimale Wartung: Sie gewinnen mehr Zeit fürs Patientengespräch.

**TrueFlow**  
makes the difference

Die Ultraschall-Technologie von ndd ist einzigartig: ihre Flussmessungen sind in allen Bereichen präzise und unabhängig von Gaszusammensetzung, Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit.

ndd **TrueFlow** ist eine hygienische und widerstandsfreie Lösung. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

**TrueCheck**  
automated precision

Patentiertes System zur Überprüfung der Kalibrierung von ndd-Geräten

- Keine Geräte-Kalibrierung mit Gasen oder DLCO-Simulator notwendig
- 5-Punkt-Kalibration, einschliesslich Stabilität und Linearität von Inertgas- und CO-Sensor.

## EasyOne Connect

Die Software **EasyOne Connect** bietet eine zentrale Datenbank und Plattform für alle EasyOne-Geräte. Das Datenmanagement war noch nie so einfach.

CODE SCANNEN

