



Medical Technologies


EasyOne Pro/LAB

Analisi POC complete della funzionalità polmonare

Fare spazio a ciò che conta nella salute polmonare

EasyOne Pro/LAB rivoluziona l'analisi della funzionalità polmonare grazie alla sua gamma completa di test, al design compatto e all'interfaccia intuitiva. Le sue funzioni, come spirometria, volumi polmonari e DLCO, coprono una vasta gamma di esigenze diagnostiche nel campo della salute respiratoria.

EasyOne Pro/LAB consente agli operatori sanitari di valutare in modo efficiente ed efficace la funzione polmonare, coadiuvando la diagnosi, il monitoraggio e la gestione delle condizioni respiratorie. La combinazione di portabilità, facilità d'uso e precisione rende EasyOne Pro/LAB adatto a diversi contesti clinici. Grazie a EasyOne Pro/LAB potete concentrarvi su ciò che conta per la salute polmonare.

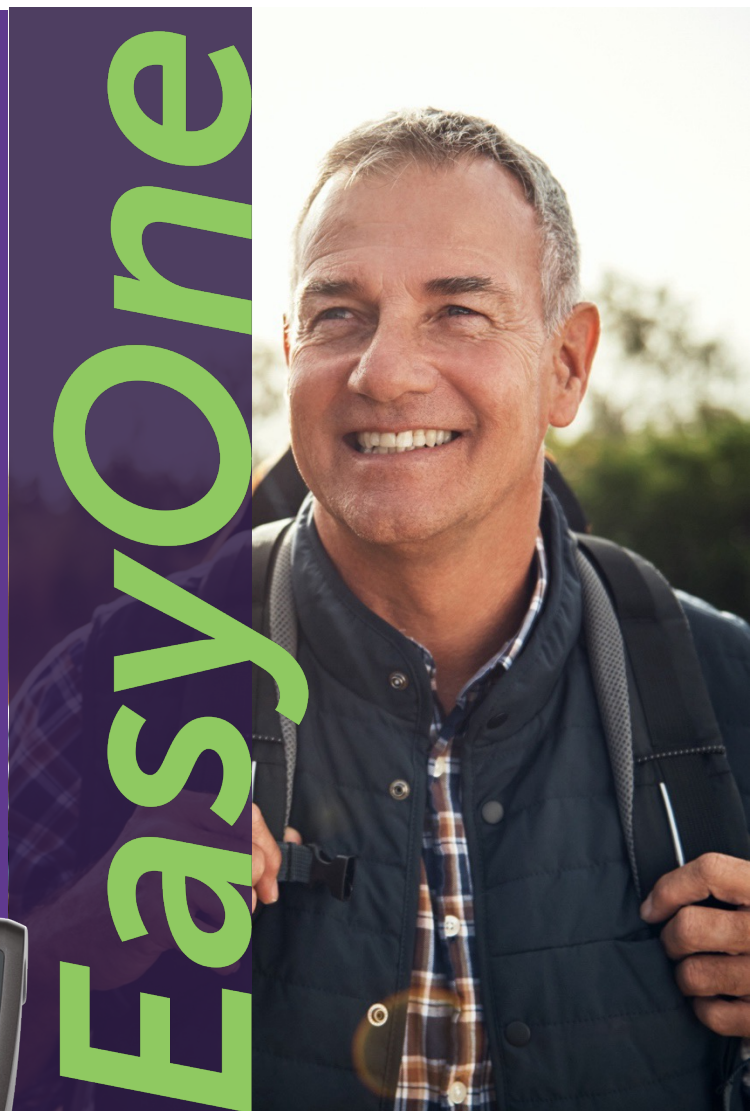

Prestazioni precise



EasyOne Pro

- Spirometria
- DLCO
- Test di provocazione

Volumi polmonari

- Diluizione dell'elio con respiro singolo

EasyOne Pro LAB

- Spirometria
- DLCO
- Test di provocazione

Volumi polmonari

- Washout dell'azoto in respiro



Specifiche

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, Provocazione e test pre/post, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL, SVC, MVV, Provocazione e test pre/post, DLCO, MBW, LCI

Lingue: cinese, croato, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, vietnamita

Connettività EMR: HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

Standard di spirometria: conforme agli standard ATS/ERS 2005 e 2019 e NIOSH/OSHA

Standard DLCO: conforme agli standard DLCO ATS/ERS 2005 e 2017.

Dimensioni: 27 x 33.5 x 27 cm (A x P x L), 8 kg

Codici catalogo

3000-1: EasyOne Pro

3100-1: EasyOne Pro LAB

2050-1: Spirette scatola da 50 pz.

2050-5: Spirette scatola da 200 pz.

2050-10: Spirette scatola da 500 pz.
Non disponibile in tutti i Paesi

3050-1: DLCO Barriettes scatola da 50 pz.

3050-2: DLCO Barriettes scatola da 100 pz.

3150-1: FRC Barriettes scatola da 40 pz.
(per l'uso solo con EasyOne Pro LAB)

3150-2: FRC Barriettes scatola da 80 pz.
(per l'uso solo con EasyOne Pro LAB)



ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA
Telefono: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Svizzera
Telefono: +41 44 512 65 00



Caratteristiche

- Design portatile e leggero, particolarmente adatto per i test presso il punto di cura.
- Approccio incentrato sull'utente per un funzionamento intuitivo e un utilizzo immediato senza tempi di riscaldamento.
- Questa soluzione igienica con Spirette e Barriette monouso elimina il rischio di contaminazione crociata.
- Progettazione di precisione svizzera
- Manutenzione minima, che consente all'operatore di dedicare più tempo alla cura del paziente.

TrueFlow
makes the difference

L'originale misurazione ad ultrasuoni del flusso è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

ndd **TrueFlow** è una soluzione igienica e priva di resistenza che non necessita di essere calibrata nel corso della sua vita utile.

TrueCheck
automated precision

Metodo brevettato per verificare le prestazioni dei dispositivi ndd

- Elimina la necessità di calibrazione dei gas e di un simulatore DLCO esterno
- Calibrazione a 5 punti compresa stabilità e linearità del gas tracciante e dei sensori di CO

EasyOne Connect

Il software **EasyOne Connect** offre un database e una piattaforma per tutte le soluzioni POC di EasyOne.

La gestione dei dati non è mai stata più facile.

SCANSIONAMI

