



Medical Technologies

# Easy-on PC

Spirometro per PC

## Collegare i pazienti a una cura polmonare precisa


Lo spirometro gestito da PC di n d d utilizza il software interattivo EasyOne Connect per fornire risultati rapidi, accurati e affidabili.

Dotato di funzioni essenziali come la visualizzazione della curva in tempo reale, gli incentivi animati e l'integrazione con i principali sistemi EMR/EHR, Easy on-PC è la scelta migliore per la spirometria collegata a PC.

Grazie alla tecnologia brevettata TrueFlow di n d d non è più necessario effettuare la calibrazione, in questo modo si risparmia tempo e si producono risultati precisi e affidabili.



# Semplice. Certo. Comprovato.

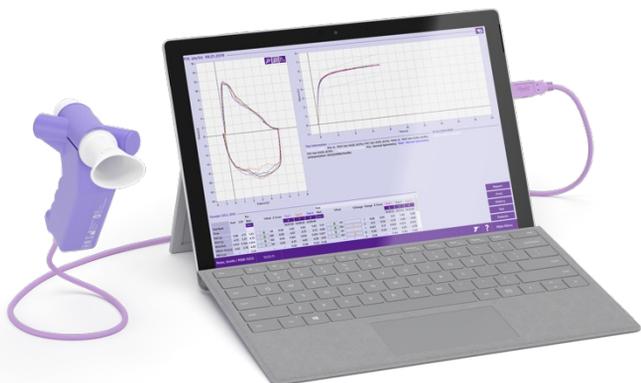

Schermate degli incentivi  
Disponibili con il software **EasyOne Connect**



## Specifiche

**Tipi di test:** FVC, FVL, SVC, MVV e test pre/post

**Lingue:** cinese, croato, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, norvegese, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco, vietnamita

**Connettività EMR:** HL7, XML, GDT, API con EasyOne Connect

**Standard:** conforme agli standard ATS/ERS 2005 e 2019 e NIOSH/OSHA

**Capacità disco rigido:** Installazione/Sistema 1 GB. Dati fino a 4 GB

**RAM:** 2 GB

**Compatibilità del software EasyOne Connect:** Windows 7, Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 Bit), Windows 11

## Codici catalogo

**2700-3:** Spirometro Easy on-PC

**2050-1:** Spirette scatola da 50 pz.

**2050-5:** Spirette scatola da 200 pz.

**2050-10:** Spirette scatola da 500 pz.  
Non disponibile in tutti i Paesi



Medical Technologies

n d d Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 Stati Uniti  
Telefono : +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurigo, Svizzera  
Telefono: +41 44 512 65 00



## Caratteristiche

- Incentivi animati in tempo reale
- Integrazione comprovata con i migliori sistemi EMR/EHR
- Determinazione dell'andamento dei risultati a lungo termine
- Automazione del feedback e dell'interpretazione dei controlli di qualità
- Interfaccia software intuitiva
- Test di provocazione integrato con protocolli personalizzabili
- Ampio intervallo di valori teorici selezionabili
- Tecnologia che non richiede calibrazione

**n d d**  
**TrueFlow**  
makes the difference

L'originale misurazione a ultrasuoni del flusso di n d d è estremamente accurata in tutti i range di flusso, indipendentemente dalla composizione dei gas, dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

n d d **TrueFlow** è una soluzione igienica e priva di resistenza che non necessita di essere calibrata nel corso della sua vita utile.

## EasyOne Connect

Il software **EasyOne Connect** offre un database e una piattaforma per tutte le soluzioni POC di EasyOne.

La gestione dei dati non è mai stata più facile.

SCANSIONAMI

