




Medical Technologies

Hallo, ich bin Buddy,  
Ihr Spirometrie-Coach.

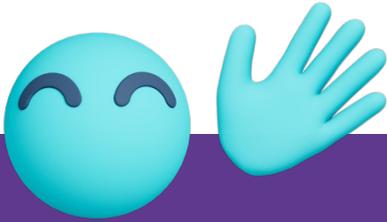

# EasyOne Sky

Spirometrie neu definiert mit Buddy

## Die Zukunft der Spirometrie

Komplizierte Untersuchungsabläufe ade! Freuen Sie sich auf Buddy, Ihren persönlichen Assistenten bei der Spirometrie.

Buddy wurde entwickelt, um spirometrische Untersuchungen zu einem angenehmeren Erlebnis für die Patienten zu machen und Arbeitsabläufe für das medizinische Fachpersonal zu optimieren – beste Voraussetzungen für hochwertige Spirometrie-Ergebnisse.

Mit dem **EasyOne Sky** wird die Spirometrie zu einem fließenden und komfortablen Teil der Patientenversorgung.



EasyOne

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie Buddy in Aktion.



# Grenzenlos. *EasyOne Sky*.

Hallo, ich bin Buddy, Ihr Spirometrie-Coach.

Ich helfe beim ...

- Vorzeigen von Tests
- Anleiten von Patienten
- Rückmeldung Geben
- Erzielen von qualitativ hochwertigen Messungen



## Technische Daten

**Testtypen:** FVC, FVL, Pre-/Post-Test

**Sprachen:** Englisch, Spanisch

**Masse:** 111 x 84 x 33 mm, 140 g

**Parameter:** BEV, FEF<sub>25</sub>, FEF<sub>25-75</sub>, FEF<sub>50</sub>, FEF<sub>75</sub>, FET, FEV<sub>0.75</sub>, FEV<sub>0.75</sub>/FVC, FEV<sub>1</sub>, FEV<sub>1</sub>/FVC, FEV<sub>1</sub>Q, FIVC, FVC, PEF, PIF, FVC %change, FEV1 %change

**Spirometrie-Sollwerte:** GLI (Quanjer) 2012, NHANES-III (Hankinson) 1999, Global GLI (Bowerman) 2023

**Datenmanagement:** EasyOne Mobile

**App-Kompatibilität:** **Windows** Download on the App Store GET IT ON Google Play  
iOS und Android sind nicht in allen Ländern verfügbar.

## Artikelnummern\*

**2800-1D** EasyOne Sky inkl. BLE-Dongle für die Nutzung am PC

**2800-1M** EasyOne Sky

**2800-50.1sp** EasyOne Sky BLE Dongle

**5050-50** EasyOne FlowTube, Pkg. mit 50 Stück

**5050-200** EasyOne FlowTube, Pkg. mit 200 Stück

**5050-500** EasyOne FlowTube, Pkg. mit 500 Stück

\*Nicht in allen Ländern verfügbar

**TrueFlow**  
*makes the difference*

Die einzigartige Ultraschalltechnologie von nnd garantiert in allen Flow-Bereichen genaue Ergebnisse, unabhängig von Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit.

nnd **TrueFlow** ist eine hygienische und widerstandsfreie Technologie. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

**nndCloud**  
*simplifying workflows*

Die moderne und sichere Konnektivitätslösung von nnd ermöglicht die Anbindung an Gesundheitsplattformen und EHR/EMR-Systeme – natürlich basierend auf neuesten Cybersicherheitsstandards.



nnd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz  
Telefon: +41 44 512 65 00

nnd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA  
Phone: +1-978-470-0923



CODE SCANNEN



ID: LP-0000101 Rev: 00  
© Copyright 2024. Alle Rechte vorbehalten