



Medical Technologies


# Easy-on PC

PC-Spirometer


## Präzise Lungendiagnostik für Ihre Praxis

Das PC-gestützte Spirometer mit der interaktiven Software **EasyOne Connect** liefert schnelle, genaue und zuverlässige Ergebnisse. Echtzeitgrafiken, Animationen zur Anleitung von Patienten und die leichte Integration in führende EMR/EHR-Systeme machen es zum Gerät der Wahl für die PC-gestützte Spirometrie.

Dank der patentierten **TrueFlow**-Technologie ist zudem keine Kalibrierung durch den Anwender nötig. Sie garantiert präzise, zuverlässige Ergebnisse und spart Zeit.

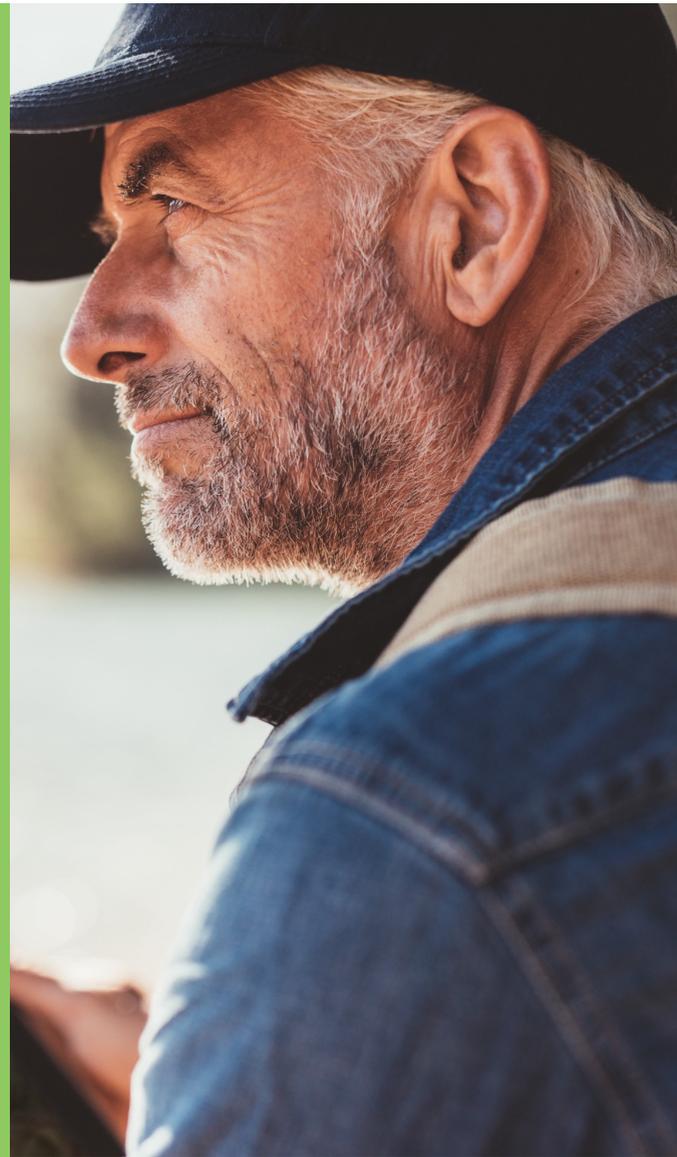

# Einfach. Zuverlässig. Bewährt.

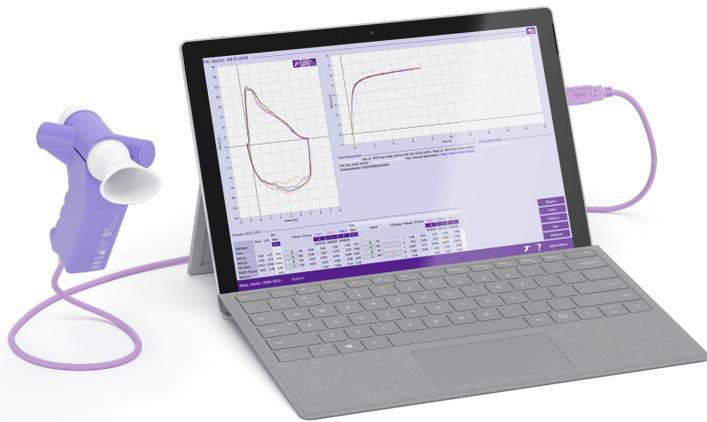

## Animationen

Verfügbar mit Software **EasyOne Connect**



## Technische Daten

**Testtypen:** FVC, FVL, SVC, MVV, Provokations- und Pre-/Post-Test

**Sprachen:** Verschiedene Sprachen verfügbar, z. B.: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch

**EMR-Konnektivität:** HL7, XML, GDT, API

**Normen:** ATS/ERS 2022, 2019 und 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

## Systemvoraussetzungen (PC):

**Speicher:** Festplatte: 1 GB (Software), 4 GB (Datenbank);  
RAM: 2 GB

**Betriebssysteme:** Windows 7, Windows 8 und 8.1, Windows 10 (32-Bit und 64-Bit); Windows 11

## Artikelnummern

**2700-3:** Easy on-PC Spirometer

**2050-1:** Spirette, Pkg. mit 50 Stück

**2050-5:** Spirette, Pkg. mit 200 Stück

**2050-10:** Spirette, Pkg. mit 500 Stück  
Nicht in allen Ländern erhältlich



Medical Technologies

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz  
Telefon: +41 44 512 65 00

ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA  
Phone: +1-978-470-0923



## Merkmale

- Echtzeit-Animationen
- Bewährte Integration in gängige EMR/EHR-Systeme
- Langzeit-Trending von Patientenergebnissen
- Automatische Qualitäts-Rückmeldung und Interpretation
- Intuitiv nutzbare Software
- Integrierter Provokationstest mit benutzerdefinierbaren Protokollen
- Grosse Auswahl an Sollwerten
- Dauerhaft stabile Kalibration

**ndd TrueFlow**  
*makes the difference*

Die Ultraschallmessung garantiert in allen Flow-Bereichen genaue Ergebnisse, unabhängig von Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit.

ndd **TrueFlow** ist eine hygienische und widerstandsfreie Technologie. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

## EasyOne Connect

Die Software **EasyOne Connect** bietet eine zentrale Datenbank und Plattform für **EasyOne**-Geräte. Das Datenmanagement war noch nie so einfach.

CODE SCANNEN



ID: LP-0000039 Rev: 03

© Copyright 2025. Alle Rechte vorbehalten