



Medical Technologies

Easy-on PC


Espirómetro para PC

Familiarizamos a los pacientes con la atención precisa de las enfermedades pulmonares


El dispositivo para PC de ndd funciona con el software interactivo **EasyOne Connect** para obtener resultados precisos y fiables al instante.

Gracias a las innovadoras funciones, como la visualización de curvas en tiempo real, incentivos animados e integración con los principales sistemas de registros médicos electrónicos (HCE) es la mejor opción para realizar pruebas de espirometría con un dispositivo para PC.

Además, la tecnología patentada **TrueFlow** de ndd elimina la necesidad de calibración sin afectar a la calidad de los resultados.

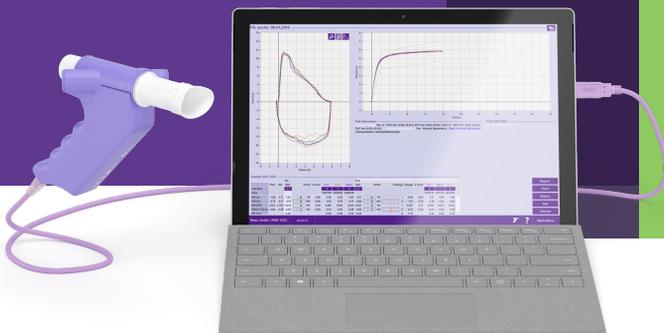

Sencillo. Seguro. Probado.

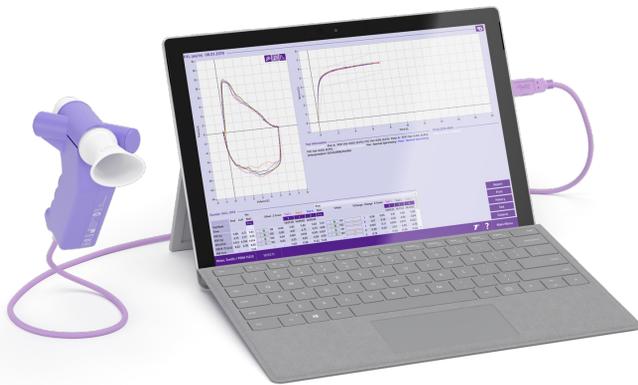

Pantallas de incentivos

Disponibles con el software **EasyOne Connect**.



Especificaciones

Tipos de pruebas: FVC, FVL, SVC, MVV, pruebas de provocación y pruebas pre y posbroncodilatadoras

Idiomas: alemán, chino, croata, danés, español, finlandés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, noruego, portugués, ruso, sueco, turco y vietnamita

Conectividad con HCE: HL7, XML, GDT, API

Normas: ATS/ERS de 2022, 2019 y 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

Requisitos del sistema (PC)

Memoria: disco duro: 1 GB (software, 4 GB (base de datos), RAM: 2 GB

Sistemas operativos: Windows 7, Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) y Windows 11

Números de referencia

2700-3: Easy on-PC spirometer

2050-1: Spirette, caja de 50 unidades

2050-5: Spirette, caja de 200 unidades

2050-10: Spirette, caja de 500 unidades
No disponible en todos los países.



Medical Technologies

n d d Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604
Andover, MA, 01810 Estados Unidos
Teléfono: +1-978-470-0923

n d d Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suiza
Teléfono: +41 44 512 65 00



Características

- Estímulos animados en tiempo real
- Integración demostrada con los principales sistemas de HCE
- Tendencias a largo plazo de los resultados de los pacientes
- Mensajes automatizados sobre la calidad de las pruebas e interpretación de los resultados
- Interfaz intuitiva
- Prueba de provocación integrada con protocolos personalizables
- Posibilidad de seleccionar diferentes valores predichos
- Tecnología sin necesidad de calibración

n d d
TrueFlow
makes the difference

La medición del flujo por ultrasonidos de n d d es extremadamente precisa en todos los rangos de flujo, independientemente de la composición del gas, la presión, la temperatura y la humedad.

n d d **TrueFlow** es una solución higiénica y sin resistencia que no requiere ningún tipo de calibración durante la vida útil del dispositivo.

EasyOne Connect

El software **EasyOne Connect** ofrece una misma base de datos y una única plataforma para las soluciones **EasyOne** en el punto de atención. El tratamiento de los datos nunca había sido tan sencillo.

ESCANÉEME

