



Medical Technologies

# Easy-on PC

Spiromètre pour PC


## Connecter les patients à des soins pulmonaires précis

Le spiromètre de ndd contrôlé par ordinateur s'associe au logiciel interactif **EasyOne Connect** pour fournir des résultats rapides, précis et fiables. Avec ses fonctionnalités probantes telles que la visualisation de courbe en direct, les incitations animées et l'intégration avec les systèmes DME/DSE de pointe, **Easy on-PC** est le choix évident dans le domaine de la spirométrie connectée sur ordinateur.

Grâce à la technologie **TrueFlow** brevetée par ndd, le calibrage n'est plus nécessaire : un gain de temps réinvesti dans la production de résultats précis et fiables.



# Simple. Certain. Éprouvé.

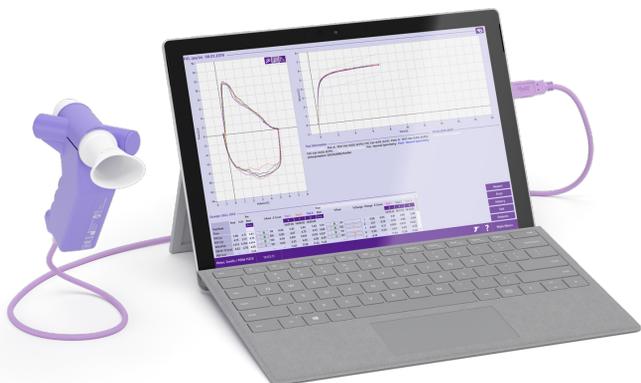

## Écrans d'incitation

Disponible avec le logiciel **EasyOne Connect**



## Spécifications

**Types de test :** FVC, FVL, SVC, MVV, provocation et pré/post-tests

**Langues :** chinois, croate, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, norvégien, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, vietnamien

**Connectivité DME :** HL7, XML, GDT, API

**Normes :** ATS/ERS 2022, 2019 et 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability

## Exigences du système (PC)

**Mémoire :** 1 Go (installation/système), 4 Go (données), RAM : 2 Go

**Systèmes d'exploitation :** Windows 7, Windows 8 et 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows 11

## Références

**2700-3 :** spiromètre Easy on-PC

**2050-1 :** boîte de 50 embouts Spirette

**2050-5 :** boîte de 200 embouts Spirette

**2050-10 :** boîte de 500 embouts Spirette  
N'est pas disponible dans tous les pays



Medical Technologies

ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 États-Unis  
Tél.: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suisse  
Tél.: +41 44 512 65 00



## Fonctionnalités

- Incitations animées en temps réel
- Intégration éprouvée avec les principaux systèmes DME/DSE
- Tendance des résultats à long terme
- Retour et interprétation de qualité automatisés
- Interface logicielle intuitive
- Test de provocation intégré avec protocoles personnalisables
- Large spectre de valeurs théoriques à sélectionner
- Technologie sans calibrage

**ndd TrueFlow**  
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons propre à ndd est très précise, quel que soit le débit et peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité. ndd **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun calibrage au cours de sa durée de vie.

## EasyOne Connect

Le logiciel **EasyOne Connect** offre une base de données et une plateforme pour les solutions **EasyOne** au chevet du patient. La gestion des données n'a jamais été aussi simple.

