



Medical Technologies

Easy-on PC

Espirômetro para PC

Conectando pacientes a cuidados pulmonares precisos


O espirômetro acionado por PC da ndd emprega o software interativo EasyOne Connect para fornecer resultados rápidos, precisos e confiáveis.

Com recursos atraentes, como visualização de curva ao vivo, incentivos animados e integração com os principais sistemas EMR/EHR, o Easy on-PC é a escolha certa para espirometria conectada ao PC.

A tecnologia TrueFlow patenteada da ndd elimina a necessidade de calibração, economizando tempo e produzindo resultados precisos e confiáveis.



Simple. Seguro. Comprovado.

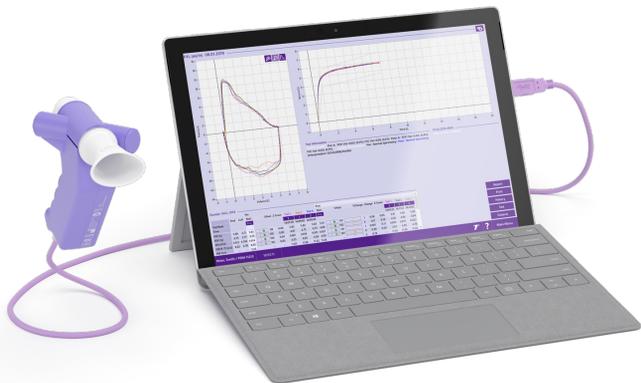

Telas de incentive

Disponível com o software *EasyOne Connect*



Especificações

Tipos de exame: FVC, FVL, SVC, MVV provocação e pré/pós-teste

Idiomas: chinês, croata, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, norueguês, português, russo, espanhol, sueco, turco, vietnamita

Conectividade EMR: HL7, XML, GDT, API

Normas: ATS/ERS 2022, 2019 e 2005, NIOSH, OSHA, SSA Disability (incapacidade seg. a S.S. dos EUA)

Requisitos para o sistema (PC):

Memória: Disco rígido: 1 GB (software), 4 GB (banco de dados), RAM: 2 GB

Sistemas operacionais: Windows 7, Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 11

Números de ref^a

2700-3: Espirômetro Easy on-PC

2050-1: Spirette - Caixa 50 unid.

2050-5: Spirette - Caixa 200 unid.

2050-10: Spirette - Caixa 500 unid.
Não disponível em todos os países



Medical Technologies

ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 EUA
Telefone: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Suíça
Telefone: +41 44 512 65 00



Características

- Incentivos animados em tempo real
- Integração comprovada com os principais sistemas EMR/EHR
- Tendência de longo prazo dos resultados
- Feedback e interpretação automatizados com qualidade
- Interface de software intuitiva
- Teste de provocação integrado com protocolos personalizáveis
- Ampla gama de valores previstos selecionáveis
- Tecnologia livre de calibração

TrueFlow
makes the difference

A medição de vazão ultrassônica exclusiva do ndd é altamente precisa em todas as faixas de vazão, independente da composição do gás, pressão, temperatura e umidade.

ndd **TrueFlow** é uma solução higiênica e livre de resistência que não requer calibração durante sua vida útil.

EasyOne Connect

O software **EasyOne Connect** oferece um banco de dados e uma plataforma para as soluções de ponto de atendimento EasyOne. O gerenciamento de dados nunca foi tão fácil.

DIGITALIZE-ME

